

V-Drive

Elektrische Schiebehilfe für Ihren manuellen Rollstuhl



Technische Daten V-Drive



Sitzbreite



max. Geschwindigkeit



max. Steigung



Reichweite



Antrieb



Batterie



Gewicht



max. Belastung

390 - 480

6 km/h

8°

ca. 15 km

150 W

2x12V/ 12Ah

11,8 kg

(ohne batterie)

135 kg*

500 - 600
(H.D. version)

200 W
(H.D. version)

2x12V/12Ah
(H.D. version)

8,2 kg

(batteriepack)

200 kg*
(H.D. version)

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (1,5mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich. * inkl. Rollstuhl

Komfort

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien... all das ist ideal für den Einsatz des V-Drive. Die bedienerfreundliche Steuerung des V-Drive sichert den täglichen und komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.




Wir bieten zwei Versionen der Schiebehilfe V-Drive an: Standardversion (für eine max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl); Schwergewichtversion (für eine max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl).

Montage

Die Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug einfach links oder rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport (z.B. in einem PKW) lässt sich der V-Drive ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Entnehmen Sie den separaten Batteriepack, trennen Sie die Antriebseinheit vom Rollstuhl – fertig!

Wollen Sie den V-Drive einmal nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden abheben und an einem der Schiebegriffe aufhängen: Ihr Rollstuhl lässt sich wieder manuell steuern.

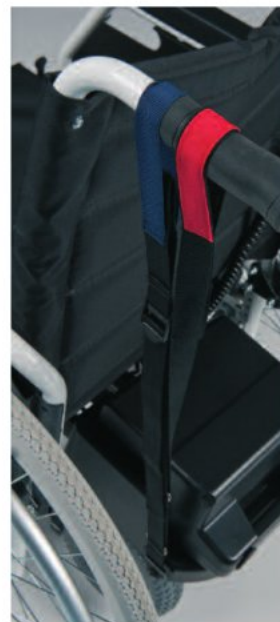


Vermeiren Deutschland GmbH

Wählerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhübelstraße 64
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95
Fax: +41 (0) 31 812 40 98
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

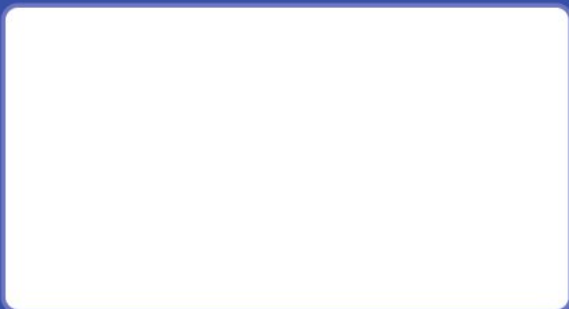

L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winezhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.